

《DRY/WET用歯科印象材用 ナナシリンジ》

## ななSYRINGE

しとやかに、軽やかに。

カセロイド(7ミリ径スモールスティック)を使用します。

ロスが出にくい容量が、とても経済的です。

そして、驚くほど軽い圧出力と滑らかな動き。

細身のサイズが、やさしい女性の手になじみます。



## ナナシリンジは7ミリ

ナナシリンジは、時代が求める経済性、合理性、操作性に対応した新世代の寒天印象用シリンジです。  
 ナナシリンジは、カセロイド（7リ径スモールスティック）にフィットしたスリムでコンパクトなシリンジです。  
 ナナシリンジは、カートシリンジと5/16シリンジのメリットを併せ持っています。

## ナナシリンジの特長

### ●優れた経済性

カセロイドはカートロイド（カートリッジタイプ）と同容量、レギュラー（5/16インチ径スティック）の約70%の容量です。これは、毎日の印象のほとんどを占める少数歯の印象に必要十分な量です。無駄な廃棄やリボイルも減り、安心で経済的です。

### ●使い分けが便利

印象によって5/16シリンジと使い分ければ、さらに便利で経済的です。例えば、ナナシリンジにポストコアに適した高弾力のデントロイド グリーンをセット、パルシリンジ（5/16シリンジ）に操作時間にゆとりのあるデントロイド プロをセットしておくなど、便利な使い方は先生のアイデア次第です。

### ●スリムでコンパクト


7ミリならではのスリム&コンパクト。圧出時のバランスとフィット感に優れ、女性の手にもピッタリです。

### ●軽くスムーズ

摩擦係数が小さいテフロン樹脂製のボディは、細径のため摩擦面積も最小。このため圧出力が軽く動きも滑らかで、女性にも楽々お使いいただけます。（摺動抵抗値の比較では、当社製5/16シリンジの約－25%という軽さです。）

### ●お手持ちのコンディショナーが使用可能

お手持ちの5/16シリンジ用コンディショナーで、そのままお使いいただけます。密閉性の高い構造により、ドライタイプだけでなくウエットタイプのコンディショナーにも対応します。

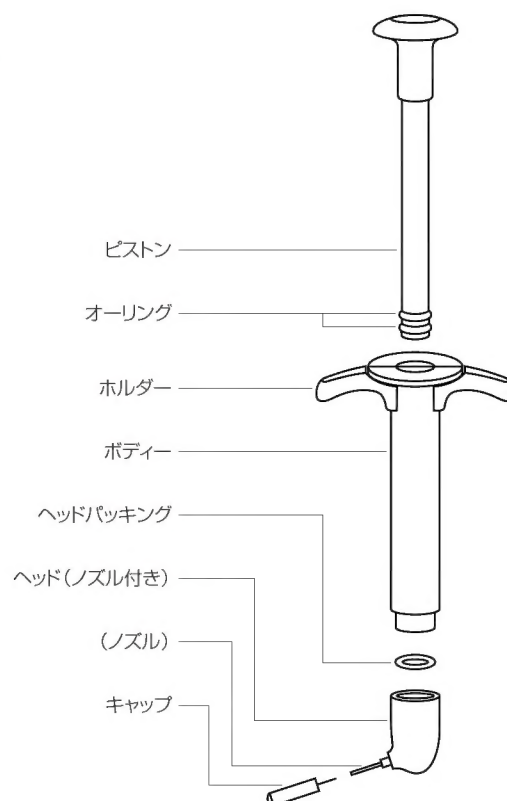

## 仕様

針規格 ..... 3S（針径：1.2mm、針長：10mm）  
 材質 ..... ボディ：PFA、その他：PA11  
 耐熱温度 ..... ボディ：260℃、その他：145℃  
 外形寸法 ..... φ23×50×115（縮長）mm  
 重量 ..... 25g


●歯科印象材用シリンジ

●一般医療機器 ●医療機器届出番号 13B2X00051000012

## 標準価格

ナナシリンジ ..... 6,800円（税別）  
 別売部品 .....
 

|             |             |
|-------------|-------------|
| ボディ         | 3,200円（1個）  |
| ヘッド（キャップ付き） | 2,600円（1個）  |
| キャップ        | 420円（1個）    |
| ホルダー        | 400円（1個）    |
| ヘッドパッキング    | 1,300円（10個） |
| オーリング       | 1,200円（10個） |

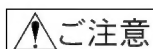

**ご注意**

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、安全に、正しくお使いください。

発売元

**Dentronics** 株式会社 **デントロニクス**

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-30-15 TEL (03) 3209-7121 FAX (03) 3232-6764

[www.dentronics.co.jp](http://www.dentronics.co.jp)

製造販売元

**SHIROTA** 城田電気炉材株式会社

〒165-0033 東京都中野区若宮2-55-3 TEL (03) 3330-6370 FAX (03) 3330-6332

[www.shirota-denki.co.jp](http://www.shirota-denki.co.jp) 医療機器製造販売業：13B2X00051

●写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。

●仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。